

Produktportfolio

Humanmedizin

Veterinärmedizin

(das Produktportfolio Vet finden Sie auf dem Flyer "Produktbaum für Veterinärmedizin")

OEM

Konventionelle Röntgengeräte und Zubehör

Konventionelle Röntgengeräte
 | Röntgensysteme mit Zukunft



...neueste Technik für konventionelle Röntgensysteme

Versionen

- **ATX Quantpower** mobiles Röntgensystem für den In- und Outdoorbereich
- **Wandarme** Haltesysteme für Monoblock Röntgengeräte zum Einsatz auf Schiffen o.ä.

Digitale Röntgensysteme inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

Medici DR-Systeme
 | Inklusive **dicomPACS® DX-R** Software
 | DR Retrofit-Systeme mit Zukunft

DR-Retrofits



...Nachrüstsets für bereits vorhandene Röntgenanlagen (verfügbar für Schwenkbügel- und Bucky/Rasterwandssysteme)


Medici Versionen

- **Medici DR Solo** 1 Panel* inkl. PC und **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- **Medici DR Multi** 2 oder 3 Panel* inkl. PC **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

* Es können verschiedene Größen und Arten von Flatpanel unterschiedlicher Hersteller verwendet werden

Leonardo DR-Systeme
 | Inklusive **dicomPACS® DX-R** Software
 | Portable Röntgensysteme mit Zukunft

DR-Kofferlösungen

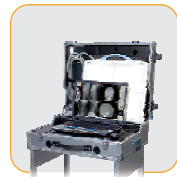


...Kofferlösungen für mobiles oder portables Röntgen

Leonardo Versionen

- **Leonardo DR 1417** portable DR-Lösung mit Sensor 14" x 17" (35 x 43 cm) inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- **Leonardo DR 1210** portable DR-Lösung mit Sensor 10" x 12" (27 x 33 cm) inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- **Leonardo DR 0810** portable DR-Lösung mit Sensor 8" x 10" (20 x 25 cm) inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

Amadeo DR-Systeme
 | Inklusive **dicomPACS® DX-R** Software
 | Röntgensysteme mit Zukunft

DR-Komplettsysteme

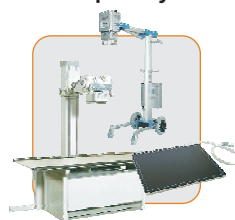


...Röntgen-Komplettsysteme inkl. Stativ, Bucky, Generator, Flatpanel etc.

Amadeo Versionen

- **Amadeo DR 1417** komplettes Schwenkbügelssystem inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- **Amadeo DR ATX 1417 mobile** ATX Quantpower inkl. Kofferlösung Leonardo 4336R inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

Divario CR-Systeme
 | Inklusive **dicomPACS® DX-R** Software
 | CR-Systeme mit Zukunft

CR-Lösungen

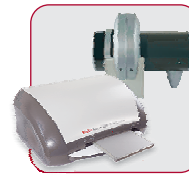

...CR-Systeme für digitales Röntgen mit Kassetten

Divario Versionen

- **Divario CR 360** inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware Basisgerät: Kodak PoC 360
- **Divario CR 35** inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware Basisgerät: Dürr

Bildmanagement (PACS)

dicomPACS®
 | Digitale
 | Bildverarbeitung



...umfasst Akquisition, Verarbeitung, Befundung, Transfer und Archivierung von Bildmaterial; sämtliche Aufnahmen sowie jegliche Art von Dokumenten werden in einer digitalen Patientenakte hinterlegt

Module & Lösungen

- Webserver
- Prothesendokumentationsmodul
- Patienten-CD
- Berichtsmodule
- Digitales Röntgenbuch
- Statistikmodul
- Videomodul
- Verarbeitung von CT- und MRT-Serien
- und vieles mehr

X-Ray Akquisitions-Software

dicomPACS® DX-R
 | X-ray Acquisition Software

[nur für OEMs]



dicomPACS® DX-R ist eine professionelle Akquisitionssoftware für Röntgenbilder von Flatpanel-Systemen (DR) und CR Geräten (Speicherfolienlesegeräte) beliebiger Hersteller. Die Software kann zusätzlich die komplette Steuerung der Röntgen-Generatoren und Röntgenanlagen unterschiedlicher Hersteller vornehmen und ermöglicht somit einen geordneten und optimalen Arbeitsablauf. Eine einfache und benutzerfreundliche Bedienoberfläche mittels Touchscreen oder Maussteuerung runden das System ab.

dicomPACS® DX-R ist das „Herzstück“ einer direkt digitalen Röntgenanlage. Egal, ob es sich hierbei um ein s.g. „Retrofit-System“ zur Digitalisierung bereits installierter Röntgengeräte, komplette Neuanlagen inkl. Generatorsteuerung oder transportable Kofferlösungen für portable/mobile Röntgen-Generatoren handelt.