



Produkt·Information

Fahrstativ für alle GIERTH Röntengeräte bis 18,5 kg

Für den mobilen Einsatz in Pferdekliniken und Kleintierpraxen

Kurzbeschreibung

- Sehr stabil, leicht fahrbar
- Für alle GIERTH Röntengeräte bis 18,5 kg geeignet
- Bremsbarer Trapezfuß mit vier Rollen
- Teilbare Edelstahlstange (100 cm und 120 cm)
- Ein Teilstück für alle Aufnahmen der Ankaufuntersuchung ausreichend (bis einschließlich proximal des Tarsalgelenkes)
- Beide Stangen problemlos aufeinander zu stecken (Aufnahmen im horizontalen Strahlengang bis zu 190 cm möglich)
- Röntengerät (am Stativ hängend) in allen Winkeln dreh- und schwenkbar
- Höheneinstellung erfolgt durch Kurbelantrieb von 0 bis 190 cm
- Einsatz in Kleintierpraxen in Kombination zu verschiedenen Röntgen-/ Behandlungstischen möglich



(ohne
 Röntgen
 generator)

Fahrstativ für alle GIERTH Röntengeräte bis 18,5 kg

Maße:




Material: korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium, Säule aus Edelstahl

Gesamtgewicht: 20 kg

Zubehör:

Für den Transport lässt sich der Fuß in drei Einzelteile zerlegen. Zudem ist die Säule in zwei Teile zerlegbar und der Kurbelkasten abnehmbar.

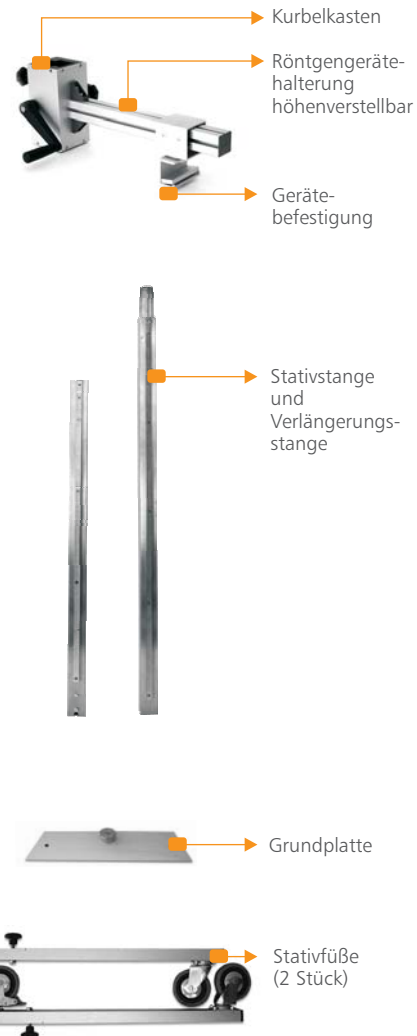

* Der Röntengenerator ist nicht im Angebot enthalten

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Stempel des Händlers