

Produkt·Information

Fahrstativ light für alle GIERTH Röntgengeräte bis 10,5 kg

Für den mobilen Einsatz in Pferdekliniken und Kleintierpraxen

Kurzbeschreibung

- Sehr stabiles und leichtes Fahrstativ mit einem bremsbaren Vier-Rollenfuß
- Für alle GIERTH Röntgengeräte bis 10,5 kg geeignet
- In allen Winkeln dreh- und schwenkbar (selbst Tangentialaufnahmen des Strahlbeins sind möglich)
- Stativ ist für den Transport sehr schnell in Einzelteile zerlegbar (der Fuß kann wie ein „Z“ zusammen geklappt werden)
- Stativstange ist teilbar:
 - Stange mit 85 cm Länge für alle Aufnahmen beim mittleren Reitpferd von distal bis proximal, einschließlich Tarsalgelenk
 - Mit zweiter Teilstange (140 cm Länge) Aufnahmen bis zum Knie möglich
 - Für höhere Regionen: beide Rohre miteinander verschraubbar




(ohne Röntngenerator)



Fahrstativ light für alle GIERTH Röntengeräte bis 10,5 kg

Maße:

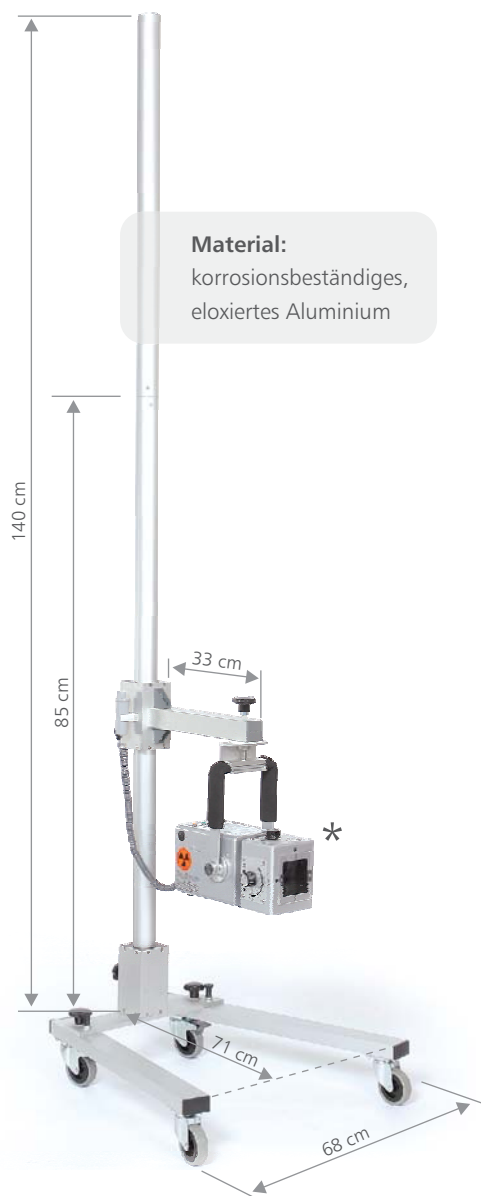

Material:

korrosionsbeständiges,
eloxiertes Aluminium

Zubehör:

Für den Transport lässt sich das Stativ sehr schnell in vier Einzelteile zerlegen, wobei der Fuß wie ein „Z“ zusammen geklappt werden kann.



Röntgengerätehalterung
höhenverstellbar



Stativstange und
Verlängerungsstange



Stativfüße
(2 Stück) mit
Grundplatte

* Der Röntgengenerator ist nicht im Angebot enthalten

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Stempel des Händlers