


Vorteile

Flexible Bildakquisition

- Anbindung verschiedener **Flatpanel- und CR-Systeme** unterschiedlicher Hersteller
- Möglichkeit zum **Anschluss von bis zu 3 Flatpanels** (Bucky, RWG und mobil) in einer Anlage
- Das **konfigurierbare Generatorinterface** erlaubt die Steuerung von Röntgeneratoren oder Röntgensystemen unterschiedlicher Hersteller und ermöglicht somit die Kontrolle der Generatorparameter direkt über die Software
- Standardmäßig enthalten ist eine Funktion für den **Parallelbetrieb von Flatpanel und CR**. Der Anwender kann wählen, ob das nächste Bild mit dem Flatpanel oder einem angeschlossenen CR-System erstellt werden soll. Durch diese Flexibilität wird auch ein **hervorragendes Ausfallkonzept** für einen möglichen Defekt des Flatpanels bereitgestellt.

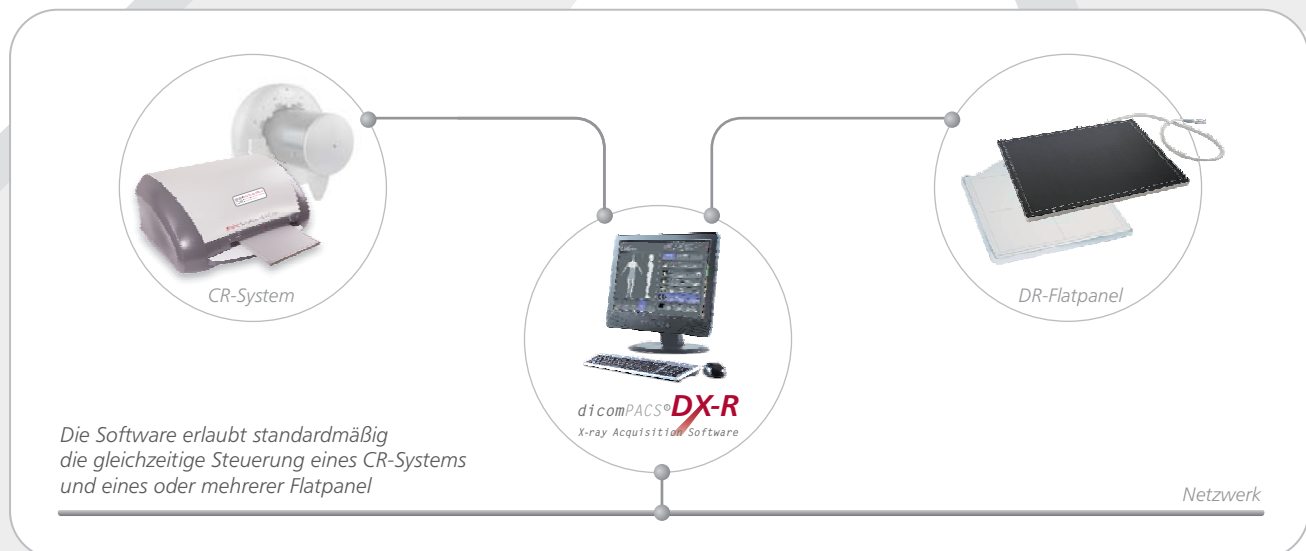

- **AEC** (Automatic Exposure Control = Belichtungsautomatik) und **APR** (Anatomical Programmed Radiography = Organautomatik) ermöglichen die **automatische Einstellung aller Röntgenparameter** für jede Projektion mit einfacher, manueller Nachbearbeitungsmöglichkeit
- **Integration von Flächendosismessgeräten** (DAP), Werte werden direkt dem jeweiligen Bild zugeordnet
- Elektronisches **Röntgentagebuch**