



# Produkt·Information

## Röntgentisch CombiVet S, Variante 1,2 und 3

Mitlaufende Kassettenlade mit integriertem Stativ


### Kurzbeschreibung

- Röntgengerät lässt sich zentriert über der Tischmitte in der Längsrichtung bewegen, Kassetten-/ Rasterlade folgen zentriert dem Generator
- Tischgestell besteht aus eloxiertem Aluminium
- Tischplatte besteht aus strahlendurchlässigem, weißen Kunststoff
- Leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig
- Optional:  
Größenverstellbare HD-Fixierkrippe aus Kunststoff
- Maße:  
Maße Tischplatte:  
155,5 x 67,5 cm  
Arbeitshöhe: 73 cm  
Höhe gesamt: 182 cm




# Röntgentisch "CombiVet S"

mit verschiedenen Methoden für die Aufhängung der Röntengeräte (Typ 1 bis 3)

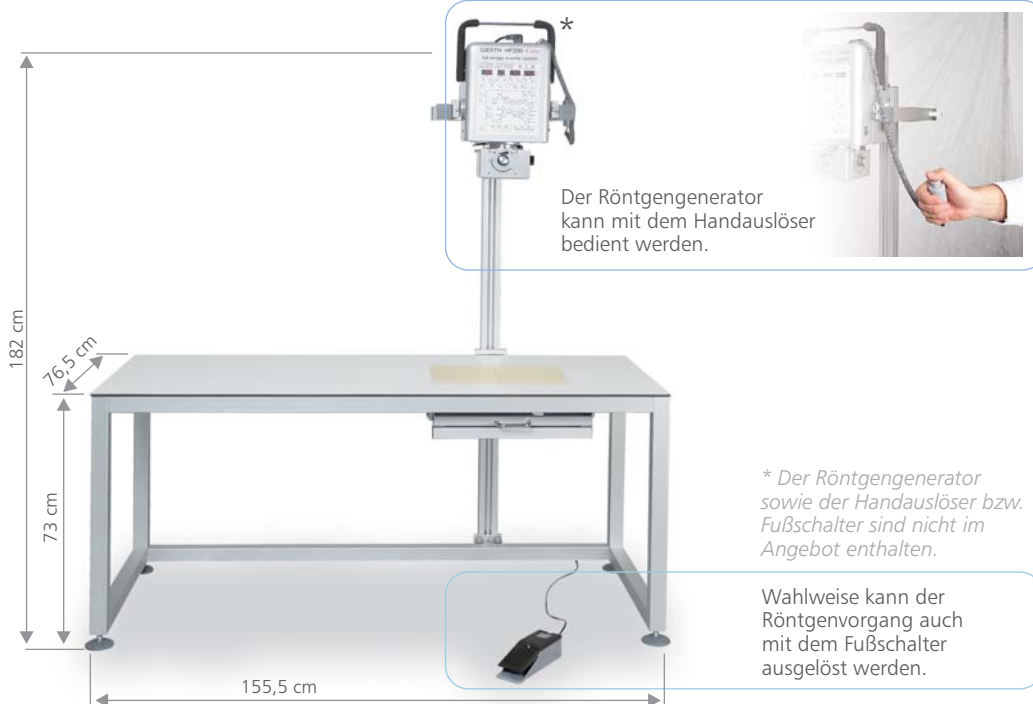


## Aufhängung Typ I

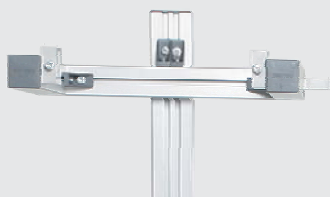

### Die Angabe des jeweiligen Röntgengeräte-typs ist zur genauen Anpassung der Geräte-aufhängung notwendig!

Die Aufhängung **CV S Typ I** beinhaltet die standardmäßige Geräteaufhängung mit einem fest eingestellten Film-Fokusabstand ohne Justiermöglichkeiten.

## Aufhängung Typ II

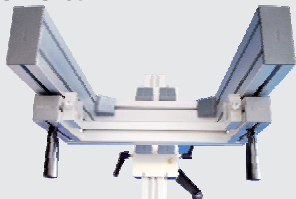

Mit der Aufhängung **CV S Typ II** ist eine Höhenjustierung durch den vorhandenen Kurbelkasten möglich. Zudem kann durch ein ergänztes Modul das Lichtstrahlenfeld auf dem Röntgentisch axial nach vorn und nach hinten verschoben werden.

## Aufhängung Typ III



Die Aufhängung **CV S Typ III** bietet neben der Höhenjustierung durch den Kurbelkasten und der Achsenverschiebung vom Lichtstrahlenfeld wie beim Typ II noch eine weitere Funktion. Das Röntgengerät ist mittels eines zusätzlich eingebauten Drehgelenks in alle Richtungen rotierbar.

### Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Stempel des Händlers