

# Referenzbericht

Direkt-digitales Röntgen mit **Amadeo V mini II** in der Tierarztpraxis Kammermaier in Laberweinting, Deutschland



**Tierarztpraxis Kammermaier**  
**(Tiermedizinisches**  
**Versorgungszentrum Labertal)**  
Mag.med.vet. Manuel M. Kammermaier

Obergrasslfing 51  
84082 Laberweinting  
www.kammermaier.de



Mag.med.vet.  
Manuel M. Kammermaier



 Amadeo V **mini II**

# Referenzbericht

**Zur Praxis:** Die Tierarztpraxis Kammermaier ist eine wichtige Adresse im Labertal, wenn es um die tierärztliche Rundumversorgung der Tiere geht. Insgesamt drei Tierärzte, zwei tiermedizinische Fachangestellte und drei Auszubildende arbeiten mit im Team.

Manuel Kammermaier und seine Mitstreiter bieten die komplette Bandbreite einer hoch modern ausgestatteten Tierarztpraxis, um alle tierischen Patienten kompetent untersuchen zu können. Neben den allgemeinen Leistungen gibt es viele zusätzliche Angebote wie z. B. digitales Röntgen, Ultraschall, Labordiagnostik, Zahnbehandlung, Chirurgie, Physiotherapie oder auch Ernährungsberatung.

## **Die Anforderungen und Beweggründe:**

„Vor einigen Jahren bin ich durch einen WDT-Katalog auf die Bildverarbeitungssoftware *dicomPACS®vet* und somit auf die Oehm und Rehbein GmbH aufmerksam geworden“, erzählte TA Kammermaier. „Schon lange planten wir die Anschaffung eines digitalen Vet-Tisches. Zunächst entschied ich mich für ein anderes Gerät, was ich bitter bereute. Nach einer mehrjährigen Amortisationsphase konnte ich mich endlich neu orientieren und landete wieder bei Oehm und Rehbein. Der Auftritt des anerkannten Medizintechnik- und Softwareherstellers überzeugte mich. Dazu kam, dass es die Firma schon seit einigen Jahrzehnten gibt. Wichtig war es uns, ein Gesamtpaket zu finden: Ein Röntgenkomplettsystem, das einfach zu handhaben und mit einer guten Software ausgestattet ist, um hochauflösende Aufnahmen zu machen. So entdeckte ich die Komplettlösung Amadeo V-DR mini II. Dank der kompetenten Beratung durch den Oehm und Rehbein-Vertrieb musste ich nicht lange überlegen.“

**Die Lösung:** Seit August 2021 wird in der Praxis digital mit dem Amadeo V-DR mini II geröntgt. Die gesamte Abwicklung und Installation verliefen sehr professionell.

Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)

Das Amadeo V mini II mit seiner vollkommen ebenen Tischplatte ohne Aufkantungen bescherte dem Team um TA Kammermaier ab dem ersten Tag zuverlässiges Arbeiten. Der Patient kann dank der serienmäßigen Klemmen an den Stirnseiten des Tisches mit Bändern optimal fixiert werden, sodass das Personal den Kontrollbereich zur Aufnahme verlassen kann.

Unter dem 4-Wege-Schwimmtisch sind der PC sowie ein durchdachtes Schubladensystem für z. B. Lagerungshilfen oder andere Kleinteile untergebracht.

Der 32kW-Hochfrequenzgenerator mit drehbarer Lichtvisierblende ist platzsparend direkt im Röntgentisch integriert. Über die Fußbremse am Tisch kann sowohl die Bewegung der Tischplatte gestoppt als auch das Licht am Kollimator bedient werden. Für die Stromversorgung genügt der Anschluss an eine Standardsteckdose (220 Volt).

Der eingebaute PC und ein direkt am Röntgenstativ angebrachter, schwenkbarer 24" Touch-Monitor gestatten das Arbeiten auf engstem Raum. Die stabile Monitor-Armhalterung ist zur bequemen Bedienung um 180° schwenkbar und auch höhenverstellbar. Ausgestattet mit dem Amadeo Softwarepaket kann die Integration in bestehende Praxisverwaltungsprogramme problemlos erfolgen.

Zur einfachen Visualisierung des Betriebszustands dient die 3-stufige LED-Statusanzeige am Röntgenstativ. Mit Hilfe des 2-stufigen Fußschalters kann der Röntgenschuss vorbereitet und ausgelöst werden. „Die Optik und Haptik des Amadeo-Gerätes finde ich auch Klasse. Das ist wirklich Hightech fast wie im Raumschiff“, ergänzt Manuel Kammermaier erfreut.

**Aus dem Röntgenalltag und den entstandenen Vorteilen für die Praxis:** „Seit August ist es mir jeden Tag eine Freude ein Röntgenbild zu machen. Besonders begeistern die herausragende Bildqualität und die einfache Bedienung. Das geht jetzt richtig schnell und gelingt auch den Mitarbeiterinnen, die nicht täglich damit zu tun haben. Die Bilder müssen nur sehr selten nachbearbeitet werden. Kurz nach dem Auslösen steht die Röntgenaufnahme bereits zur Verfügung. Die Befundung und Archivierung läuft Dank *dicomPACS® vet* einwandfrei. Die Bilder können gespeichert,



per E-Mail verschickt oder auch sofort dem Tierhalter gezeigt werden. Mir gefällt, dass ich alle Aufnahmen auf einmal speichern kann. Wir arbeiten mit Vetera als Praxisverwaltungssoftware. Das passt gut mit der Röntgensoftware zusammen. Insgesamt haben wir drei Befundstationen, eine im OP und zwei weitere in den Behandlungsräumen“.

Das Arbeiten mit der *dicomPACS®vet* Steuerungskonsole ist selbsterklärend und bietet spezielle Funktionen für den Veterinärbereich z. B.: eine besondere Erfassungsmaske für Patienten- und Halterdaten, spezielle Bildfilter und vieles mehr. „An dem integrierten Bedienpult kann alles effizient über Touchscreen eingegeben und bedient werden. Das garantiert einen optimalen Arbeitsablauf,“ betont der Tierarzt. „Das ganze Gerät ist durchdacht. Der multimediale Röntgenhelfer gibt dem Praxispersonal Unterstützung bei der optimalen Positionierung des Patienten. Es ist wirklich erleichternd, dass das Amadeo V-DR mini II auch über den Fußschalter betätigt werden kann. Dann hat man beide Hände frei. Der Stauraum unter dem Tisch ist sensationell. Die schwimmende Tischplatte ist sehr praktisch. Nachdem ich das Tier fixiert und ruhiggestellt habe, kann ich die Tischplatte ausrichten und entspannt röntgen.“


**Installation und Wartung:** „Der Aufbau des Röntengerätes verlief dank des Mitarbeiters der Oehm und Rehbein GmbH sehr gut. Er war äußerst kompetent und sehr hilfsbereit – ein Top-Aushängeschild für die Firma.

Für die optimale Rundum-Versorgung haben wir einen sehr fairen Servicevertrag abgeschlossen. Mir ist positiv aufgefallen, dass es keine versteckten Kosten weder beim Kauf des Gerätes noch beim Abschluss des Vertrages gab. Der Service ist alles in allem sehr preiswert, transparent und durchdacht.

Weiterhin verfügt Oehm und Rehbein über eine großartige Supportabteilung, die uns immer freundlich und mit Sachverstand zur Seite steht.

Insgesamt bin ich wirklich zufrieden. Könnte ich Sterne vergeben, dann wären es 5 von 5!

Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)

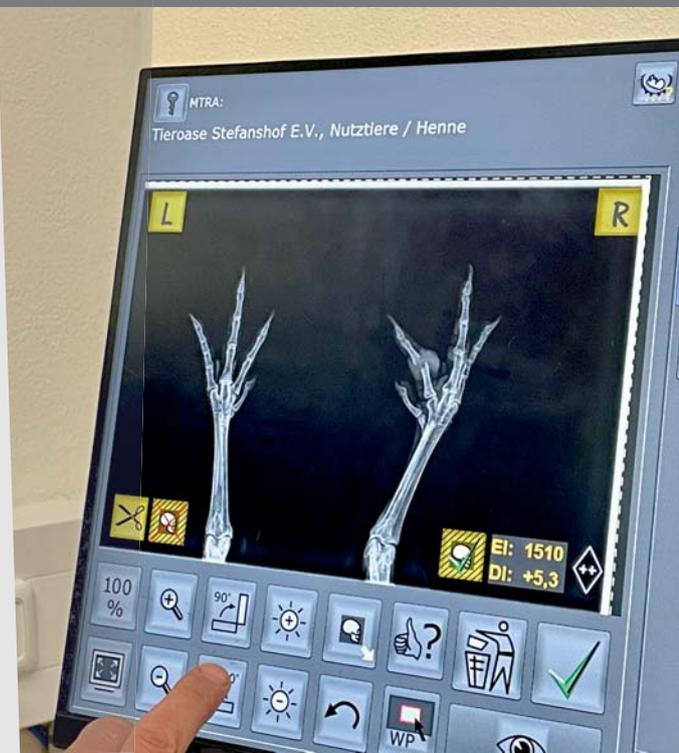



 Oehm und Rehbein

Platzsparendes  
Röntgen-Komplettsystem  
für die Kleintiermedizin –  
jetzt "Made in Germany"!

## Amadeo V mini II

Der vollkommen ebene 4-Wege-Schwimmtisch ohne Aufkantungen wird Sie begeistern. Dieses Veterinär-Röntgensystem ist eine Eigenentwicklung „Made in Germany“ der Oehm und Rehbein GmbH und das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Tierärzten und universitären Einrichtungen.

Der PC sowie eine Schublade für Lagerungshilfen sind platzsparend direkt im Röntgentisch eingefügt. Der 32kW-Hochfrequenzgenerator mit drehbarer Lichtvisierblende ist ebenfalls im Röntgentisch integriert. Über die völlig geräuschfreie Fußbremse am Tisch kann sowohl die Bewegung der Tischplatte gestoppt als auch das Licht am Kollimator bedient werden. Für die Stromversorgung genügt der Anschluss an eine Standardsteckdose.

Der um 180° schwenkbare und höhenverstellbare Touchscreen-Monitor gestattet eine bequeme Bedienung der Röntgensoftware auf engstem Raum. Die Integration Ihres Praxisverwaltungssystems ist für uns selbstverständlich. Eine 3-stufige LED-Statusanzeige am Röntgenstativ realisiert die einfache Visualisierung des Betriebszustands. Mit Hilfe des 2-stufigen Fußschalters kann der Röntgenschuss vorbereitet und ausgelöst werden.

Unternehmenszentrale:

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c  
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555  
[www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de), [info@oehm-rehbein.de](mailto:info@oehm-rehbein.de)

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston  
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom  
[www.celticsmr.co.uk](http://www.celticsmr.co.uk), [sales@celticsmr.co.uk](mailto:sales@celticsmr.co.uk)

Info-Hotline: +49 381 36 600 600



Weitere detaillierte  
Informationen  
zum **Amadeo V mini II**  
finden Sie hier.